


ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫЙ ФИКСАТОР ПОЗВОНОЧНИКА С ВЕРХНЕЙ ФИКСАЦИЕЙ «ТЮЛЬПАН»



СИСТЕМА транспедикулярной фиксации (ТПФ) для стабилизации позвоночника в грудном, поясничном и крестцовом отделах. Система изготавливается из титанового сплава с высокой биосовместимостью, позволяющей проводить КТ и МРТ исследования в послеоперационном периоде.

В конструкции применяются шурупы трех типов: **моноаксиальные(1)** **полиаксиальные(2)** и **редукционные(3)** с верхней фиксацией. Блокирующий винт для фиксации шурупов имеет специальную резьбу, предотвращающую раскручивание конструкции.

Полиаксиальный шуруп позволяет производить установку с отклонением до 18° в любую сторону. Низкий профиль головки шурупа позволяет устанавливать шурупы вплотную друг к другу и снижает травматизацию мягких тканей.

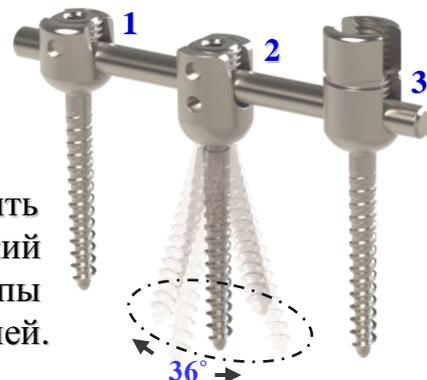

ТПФ «ТЮЛЬПАН»

Монтажный инструмент

Включает в себя следующие имплантаты	Наименование
Штанга гладкая Ø5,5мм L 80÷220мм, 500мм	инструмент для сведения шурупов, крючков
Штанга гладкая Ø6,0мм L 80÷220мм, 500мм	инструмент для разведения шурупов, крючков
Шурупы (шаг по длине 5мм):	инструмент для гибки стержня вне раны
Ø4,5 L30÷55мм	ключ для введения моноаксиального шурупа
Ø5,0 L30÷55мм	ключ для введения полиаксиального шурупа
Ø5,5 L40÷55мм	ключ для перемычки на 3.5
Ø6,0 L40÷55мм	цанга для спицы, спицы
Ø6,5 L40÷70мм	шило №1
Ø7,0 L40÷70мм	шило №2
Узел перемычки	
Дополнительный инструмент по заказу: шуп, утапливатель, держатель гайки, ключ для наживления гайки	